

His-tag 10x Binding Buffer

販売元コード：72-1166-01

製造元コード：E1207

100 ml

研究用試薬



本キットに含まれる試薬はすべて研究用です。診断・臨床用試薬として使用しないでください。本キットの使用にあたっては、実験室での一般的な注意事項を厳守し、安全に留意してください。

特徴

Purelumn® System His-tag 10x Binding BufferはPurelumn® System専用の試薬です。ICカード“Purelumn® System His-tag Purification Protocol-150”、Purelumn® System His-tag Purification Kit-150と組み合わせて使用することにより、1サンプル当たり5mlの大腸菌破砕液上清からHis-tag融合タンパク質の精製を行うことができます。

精製産物を Purelumn® System Gel Filtration Kit および Purelumn® System Gel Filtration Protocol を用いることにより、高純度な精製と脱塩処理が可能です。

内容

Purelumn® His-tag 10x Binding Buffer



(ボトル材質：PP) 100 ml


必要なもの（別売り）



Purelumn® System
His-tag Purification
Kit-150



Tip Holder
(廃棄用、サンプル用は共通)

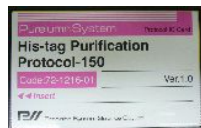

Purelumn® System
His-tag Purification
Protocol-150

使用目的

His-tag 融合タンパク質の精製

お客様に準備して頂くもの

His-tag 融合タンパク質を発現させた組換え型大腸菌破砕液上清 4.5 ml

破砕液の推奨調製方法

集菌した大腸菌ペレットを凍結融解後、終濃度 1 mg/ml の Lysozyme を加え、氷上で 30 分間静置します。次に終濃度 5 μg/ml の DNase I および RNase を加えて氷上で 10 分間静置します。4 °C、3,000 xg で遠心し、上清を大腸菌破砕液上清とします。（詳しくは” Molecular Cloning 3rd, Sambrook and Russel” 15.46 の「Lysozyme と DNase I による可溶性」をご参照ください。）超音波破砕でも適用可能ですが、至適条件をご検討ください。

使用方法（Purelumn® 本体へのセット）

* ご使用になる前に必ず Purelumn® 本体および Purelumn® System His-tag Purification Kit-150 の「取扱説明書」をお読みく

ださい。

1. IC カード「His-tag Purification Protocol-150」を Purelumn® 本体に挿入し、装置の電源を入れます。
2. Purelumn® System His-tag Purification Kit-150 の His-tag Purelumn® Reagent を試薬カートリッジラックへセットし、Purelumn® 本体へセットします。
3. 廃液用 5 ml Tip Holder および His-tag Purification Kit-150 の His-tag Tip Set-150 と DN-100N Tip Set をチップ/チューブラックにセットします。
4. 0.5 ml の His-tag 10x Binding Buffer と 4.5ml の大腸菌破砕液上清を添加したサンプル用 5 ml Tip Holder を Purelumn® 本体にセットした試薬カートリッジの Well 11 に挿入します。



S : 廃液用 5ml Tip Holder

E : Elution Tube

A : His-tag Tip Set-150

D : DN-100N Tip Set



試薬カートリッジ
Well11 にサンプル
5ml をセットし、押し
込みます。

5. Purelumn® System His-tag Purification Kit-150 の His-tag Purelumn® Reagent および 3. を本体にセットします。最大セット数は 6 サンプルですが、それ以下の場合には均等にサンプルをセットして下さい。方側に偏りがあると、精製効率の低下に繋がる場合があります。
6. His-tag Purelumn® Reagent、Tip Set-150、Tube、Tip Holder、DN-100N Tip Set 試薬カートリッジラック、チップ/チューブラックが正しく装置にセットされていることを確認して装置のフロントカバーをしっかりと閉めます。
7. 「START」キーを押して、2「His-tag 5ml」を選択し、再度「START」キーを押して、操作を開始します。

His-tag Purelumn® Reagent、His-tag Tip Set-150、5ml Tip Holder、DN-100N Tip Set、Tube、試薬カートリッジラック、チップ/チューブラックが正しく装置にセットされていることを確認してください。これらが正しくセットされないまま使用すると誤作動や故障の原因となります。



注意

使用上の注意

消耗品を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

保存上の注意

室温（15～25 °C）にて保存し、高温多湿、及び振動や直射日光の当たる場所は避けてください。また、転倒した状態等で保存せず、アルミシール側を上にした状態で保存してください。

* Purelumn® はプレジジョン・システム・サイエンス株式会社の登録商標です。

関連商品コード一覧

商品名	販売元コード	製造元コード
<i>Purelumn</i> [®]	72-1137-01	D3000
Purelumn [®] System His-tag 10x Binding Buffer	72-1166-01	E1207
Purelumn [®] System His-tag Purification Kit-150	72-1163-01	E1206
Purelumn [®] System His-tag Purification Protocol-150	72-1216-01	I1265
Purelumn [®] System Tip Holder	72-1165-01	F4913
Purelumn [®] System Gel Filtration Kit	72-1139-01	E1201
Purelumn [®] System Gel Filtration Protocol	72-1145-01	I1262